


Instructions For Use

embrace MINIMIZE®

By combining the restorative properties of silicone with the benefits of Stress-Shield™ Technology, this unique scar treatment softens, flattens, and fades old scar tissue to drastically improve a scar's appearance.

embrace MINIMIZE®

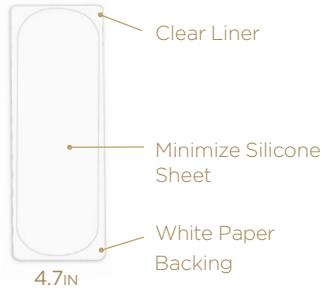

INTENDED USE

embrace MINIMIZE® is intended for use in the management of closed hyperproliferative (hypertrophic and keloid) scars.

CONTRAINDICATIONS

- Not for use on open incision lines, injuries or abraded skin.

WARNINGS & PRECAUTIONS

- DO NOT** use on scars if infection is suspected.
- Not a sterile device.
- For external (topical) use only.
- DO NOT** use if you have known adverse reactions to medical adhesives or skin diseases that would preclude the use of adhesive sheets.
- MINIMIZE is water-resistant. Short term exposure to water, (such as showering) is OK. DO NOT expose to water for prolonged periods of time.
- Wear time may be reduced in high mobility areas.
- DO NOT** pull quickly as skin irritation or tearing can occur.
- Keep out of reach of children.

- Any serious medical incident that occurs in relation to the embrace® device should be reported to Neodyne Biosciences and the Competent Authority of your member state.

POTENTIAL SIDE EFFECTS

Application of any surgical tape or adhesive sheet may strip the skin upon removal. Consult with your physician should any of the following occur:

- Skin irritation, redness, or pain
- Infection and/or fever
- Allergic reaction

BEFORE APPLYING MINIMIZE

- Position yourself in a way that ensures the area around the scar is as flat as possible, allowing for a natural range of motion once the sheet is applied
- Thoroughly clean and dry the scar and surrounding area


Applying MINIMIZE

- Peel open packet and remove product.** There are 3 silicone sheets on the tri-fold liner.

- Separate one sheet** by tearing along perforation.

- Peel off the white paper backing** from the clear liner.

- Hold the liner with one hand and partially peel** one corner of the minimize silicone sheet to expose the adhesive side.

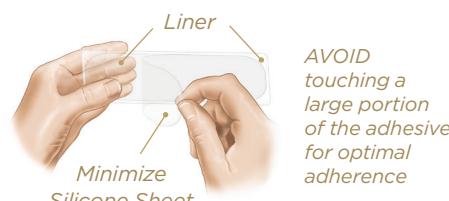

- Place exposed sheet onto scar site with adhesive side on the skin.** Next press and hold sheet down to adhere to the skin.



EFFETS SECONDAIRES POTENTIELS

L'utilisation de tout sparadrap chirurgical ou pansement adhésif peut abîmer la peau. Veuillez consulter votre médecin si l'un des symptômes suivant apparaît:

- Irritation de la peau, rougeur ou douleur
- Infection et/ou fièvre
- Réaction allergique


AVANT D'APPLIQUER MINIMIZE

- Positionnez-vous de manière à ce que la zone où se trouve la cicatrice soit plane, tout en permettant des mouvements une fois le pansement posé.
- Nettoyez soigneusement la cicatrice et la zone alentour puis laissez sécher.

Appliquer MINIMIZE

- Ouvrez l'emballage et sortez le produit.** Il y a trois feuilles de silicone par film.

- Gently peel** the remaining clear liner.

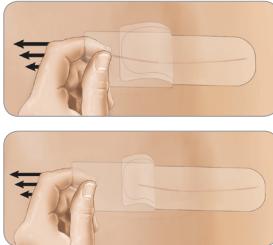

DO NOT stretch dressing, as this may cause irritation or blistering

- Pat and roll out** second half of the sheet so it firmly adheres to the skin, covering the entire scar site.



- Smooth out any air bubbles and apply pressure onto entire sheet for 60 seconds** to ensure adherence to the skin.



Smooth out with fingers to release air pockets

- Once applied, embrace MINIMIZE® can last up to 10 days, and is then discarded and replaced with a new sheet.



SCARS REQUIRING MULTIPLE DRESSINGS

For scars longer than a single dressing, dressings should overlap. Avoid gaps between dressings, and ensure scar is completely covered.



Removing MINIMIZE

- It is helpful to remove the sheet in the shower using warm water and soap.
- Gently peel the sheet back at 180°, rolling it back upon itself. Use your other hand to apply slight pressure on your skin as you remove the sheet.



- Enlevez délicatement** le film transparent restant.



NE PAS étirer le pansement puisque cela peut causer des irritations ou des ampoules.

- Déroulez et appuyez légèrement** pour que la deuxième partie de la feuille adhère à la peau, recouvrant ainsi la totalité de la cicatrice.



- Faites sortir les bulles d'air et appuyez sur la feuille pendant 60 secondes** pour vous assurer que le pansement adhère correctement.



Appuyez légèrement pour faire sortir les bulles d'air

English | Anglais | Inglés

- Do not pull quickly as skin irritation or tearing can occur.
- If any adhesive remains, remove it with an oil based product such as baby oil or over-the-counter adhesive remover.

Helpful Hints

IMPORTANT THINGS TO REMEMBER

- Trim to size with rounded corners to avoid irritation.
- After initial application, embrace MINIMIZE® can be worn on average 10 days.
- Do not shower for 4 hours after application.
- Do not apply compression garments or binders for 1-2 hours after application.
- Minor redness is OK.
- Moisture or condensation under the sheet is OK (such as after showering).
- After application, a minor wrinkly or wavy appearance in the sheet is normal.



1.855.722.7879

Customer Service Telephone

Help@EmbraceScarTherapy.com
Customer Service E-mail

www.EmbraceScarTherapy.com
Product Website

youtube.com/EmbraceScarTherapy
Application/Removal Videos

www.EmbraceScarTherapy.com/how-to-use-minimize
Digital Instructions (this document)

Manufactured for: Neodyne Biosciences, Inc. | 47801 Fremont Blvd. | Fremont, CA 94538 | United States of America

Made in Mexico. Made with USA materials

CE REP Emergo Europe | Prinsesegracht 20, 2514 AP | The Hague, The Netherlands

embrace MINIMIZE® is a trademark of Neodyne Biosciences, Inc. © 2019 Neodyne Biosciences, Inc. All rights reserved. LS11667 Rev E. Patents: <https://www.embracecartherapy.com/citations-patents/>

French | Française | Francés

- Ne tirez pas rapidement sur la feuille, cela pourrait irriter ou déchirer la peau.
- Si la partie adhésive reste collée sur la peau, utilisez un produit à base d'huile, tel que de l'huile pour bébé ou de l'huile antiadhésive disponible sans ordonnance.

Conseils pratiques

POINTS IMPORTANTS À RETENIR

- Coupez la feuille, avec des bords arrondis, afin d'éviter les irritations
- Après la première pose, vous pouvez porter embrace MINIMIZETM en moyenne 10 jours.
- Ne pas vous doucher dans les quatre heures suivant la pose du pansement.
- Ne pas porter de vêtement de compression dans l'heure ou les deux heures suivant la pose du pansement.
- De petites rougeurs peuvent apparaître.
- De l'humidité ou de la condensation peut apparaître sous le pansement (par ex. après la douche).
- Une fois posé, il est normal que le pansement soit légèrement plissé ou ondulé.

Consignes d'utilisation

embrace MINIMIZE®



UTILISATION PRÉVUE

embrace MINIMIZE® doit être utilisé pour le traitement des cicatrices hyperprolifératives fermées (hypertrophiques et chéloïdes).

CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser sur des incisions ouvertes, des blessures ou une peau éraflée.

AVERTISSEMENTS & PRÉCAUTIONS


- **NE PAS** utiliser sur les cicatrices s'il y a un risque d'infection.
- N'est pas un dispositif stérile
- Usage externe (local) uniquement
- **NE PAS** utiliser si vous avez obtenus des effets indésirables lors de l'utilisation de pansements médicaux adhésifs ou si vous souffrez d'une maladie cutanée empêchant l'utilisation de pansements adhésifs.
- MINIMIZE résiste à l'eau, en cas de faible exposition à l'eau (ex : douche). **NE PAS** exposer à l'eau pendant une durée prolongée.
- La durée du port peut être réduite pour les zones en mouvement.
- **NE TIREZ PAS** rapidement sur la feuille, cela pourrait irriter ou déchirer la peau.
- Conserver hors de portée des enfants.

• Tout incident médical grave se produisant en rapport avec le dispositif Embrace® doit être signalé à Neodyne Biosciences et aux autorités compétentes de votre État membre.

2 Séparez l'une des feuilles en tirant le long de la partie perforée.

3 Ôtez le papier blanc du film transparent.

4 Tenez le film dans une main et enlever partiellement un angle de la feuille de silicone Minimize pour faire apparaître le côté adhésif.

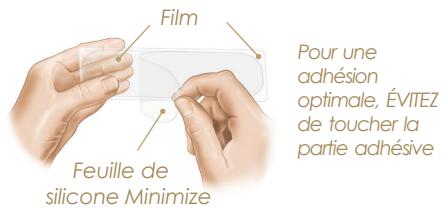

5 Placez la feuille, partie adhésive sur la peau, sur la zone de cicatrisation. Puis, appuyez légèrement sur la feuille pour faciliter l'adhésion.



• Todo incidente médico grave que se produzca en relación con el dispositivo **embrace®** debe informarse a Neodyne Biosciences y a la Autoridad Competente de su estado miembro.

POSSIBLES EFFECTOS SECUNDARIOS

La aplicación de cualquier cinta quirúrgica o lámina adhesiva podría desgarrar la piel al momento de quitarla. Consulte a su médico si sucede alguno de los siguientes:

- Irritación de la piel, enrojecimiento o dolor
- Infección y/o fiebre
- Reacción alérgica

ANTES DE APLICAR MINIMIZE

- Adopte una posición que deje el área alrededor de la cicatriz lo más plana posible, permitiendo un rango de movimiento natural una vez aplicada la lámina.
- Limpie y seque completamente la cicatriz y el área alrededor

Aplicar MINIMIZE

1 Abra el paquete despegándolo y saque el **producto**. Hay 3 láminas de silicona en la funda triple

2 Separe una lámina arrancándola por la línea perforada.

3 Despegue el fondo de papel blanco de la funda clara.

4 Sostenga la funda con una mano y despegue parcialmente un ángulo de la lámina de silicona minimize dejando expuesto el lado adhesivo.



5 Coloque la lámina expuesta sobre el lugar de la cicatriz, con el lado adhesivo en contacto con la piel. A continuación, presione y sostenga la lámina hacia abajo para que se adhiera a la piel.



9 Chaque feuille embrasse MINIMIZE® tient en moyenne 10 jours et doit ensuite être jetée et remplacée par une nouvelle feuille.



CICATRICES NÉCESSITANT PLUSIEURS PANSEMENTS

Pour les grandes cicatrices, le deuxième pansement appliqué doit se superposer au premier. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace entre les pansements, et que la cicatrice est entièrement recouverte.



Enlever MINIMIZE

• Il est plus facile d'enlever la feuille sous la douche avec de l'eau chaude et du savon.

• Ôtez délicatement la feuille, en l'enroulant vers l'arrière. Utilisez votre main libre pour appuyer légèrement sur la peau lorsque vous enlevez la feuille.



Le pansement reste efficace même lorsqu'il est plissé ou ondulé. Il n'est PAS nécessaire de recommencer la pose.

1.855.722.7879

Téléphone service client

Help@EmbraceScarTherapy.com Email service client

www.EmbraceScarTherapy.com Site internet du produit

youtube.com/EmbraceScarTherapy Tutoriels pour poser et enlever le pansement

www.EmbraceScarTherapy.com/how-to-use-minimize Consignes d'utilisation au format numérique (le présent document)

Manufacturé pour: Neodyne Biosciences, Inc. | 47801 Fremont Blvd. | Fremont, CA 94538 | États-Unis d'Amérique

Fabriqué au Mexique. Fabriqué avec des matériaux américains

CE
EMC
RoHS
CE
EMC
RoHS

Emereo Europe | Prinsessegracht 20, 2514 AP | La Haye, Pays-Bas
embrace MINIMIZE® est une marque de Neodyne Biosciences, Inc. © 2019 Neodyne Biosciences, Inc. Tous droits réservés. LS11667 Rev E. Patents: <https://www.embracecartherapy.com/citations-patents/>

Spanish | Espanol | Español

- No quitar rápidamente, pues podría provocar irritación o desgarro de la piel.
- Si quedan restos de adhesivo, quitelos con un producto oleoso, como aceite para bebé o un removedor de adhesivos de venta libre.

Consejos útiles

RECORDATORIOS IMPORTANTES

- Recorte según el tamaño necesario, dejando ángulos redondeados para evitar la irritación.
- Tras la aplicación inicial, **embrace MINIMIZE®** se puede usar un promedio de 10 días.
- No ducharse en las 4 horas siguientes a la aplicación.
- No aplicar prendas de compresión ni fajas por 1 o 2 horas después de la aplicación.
- Es normal que haya un leve enrojecimiento.
- Es normal que haya humedad o condensación bajo la lámina (por ejemplo, después de ducharse).
- Tras la aplicación, es normal que la lámina tenga un aspecto levemente rugoso u ondulado.



El aspecto ondulado/rugoso es normal y la lámina sigue siendo efectiva. NO es necesario hacer nuevamente la aplicación.

1.855.722.7879

Teléfono de atención al cliente

Help@EmbraceScarTherapy.com Correo electrónico de atención al cliente

www.EmbraceScarTherapy.com Sitio web del producto

youtube.com/EmbraceScarTherapy Videos sobre aplicación/remoción

www.EmbraceScarTherapy.com/how-to-use-minimize Instrucciones en formato digital (este documento)

Fabricado para: Neodyne Biosciences, Inc. | 47801 Fremont Blvd. | Fremont, CA 94538 | Estados Unidos de América

Hecho en México. Fabricado con materiales de EE. UU.

Emereo Europe | Prinsessegracht 20, 2514 AP | La Haye, Países Bajos

embrace MINIMIZE® es una marca comercial de Neodyne Biosciences, Inc. © 2019 Neodyne Biosciences, Inc. Todos los derechos reservados. LS11667 Rev E. Patents: <https://www.embracecartherapy.com/citations-patents/>